


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Массажер
для шеи и плеч
Модель UM-03

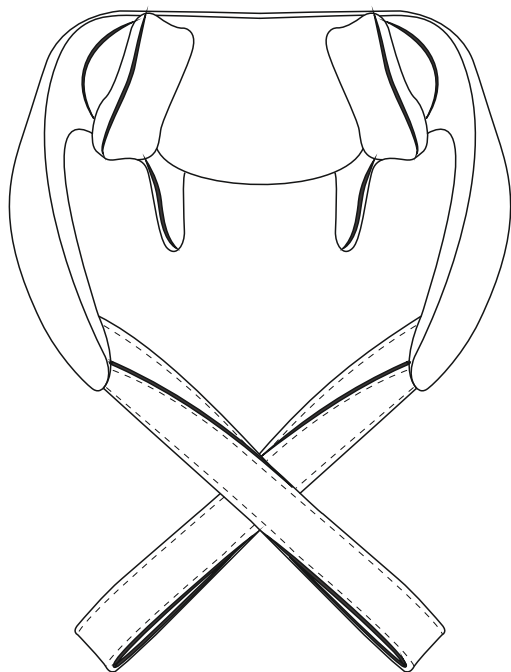

СОДЕРЖАНИЕ

- Показания к применению
- Противопоказания
- Меры безопасности
- Комплектация
- Технические характеристики
- Панель управления
- Инструкция по эксплуатации
- Способ управления
- Возможные неисправности прибора и их способы их устранения
- Гарантийные обязательства
- Для заметок

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- напряжение в мышцах
- слабый тонус мышц
- малоподвижный образ жизни
- утомляемость
- повышенная раздражительность
- бессонница
- отеки
- стресс
- подготовка к физическим нагрузкам

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- психические заболевания;
- лихорадка;
- острые воспалительные и гнойные процессы;
- эпилепсия;
- туберкулез легких;
- злокачественные опухоли (новообразования);
- кровотечения и заболевания крови;
- сердечно-сосудистая недостаточность;
- аритмия, нарушения ритма сердца;
- гипертоническая болезнь;
- наличие кардиостимулятора или иных электроаппаратов на теле;
- беременность;
- алкогольное опьянение;
- наркотическое опьянение;
- индивидуальная непереносимость процедуры

При наличии каких-либо заболеваний, перед применением прибора необходимо проконсультироваться со специалистом

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Данный прибор является сложным техническим устройством. Во избежании травмы или поражения электрическим током соблюдайте меры безопасности во время использования.

1. Перед началом использования прибора ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
2. Массажер предназначен только для личного пользования. Не используйте прибор в коммерческих целях.
3. Перед началом использования прибора проконсультируйтесь со специалистом.
4. Используйте массажер только по его прямому назначению, как указано в данном руководстве по эксплуатации.
5. Не используйте прибор во время беременности или плохого самочувствия.
6. Не используйте прибор во время сна.
7. Не используйте прибор на пораженных участках кожи.
8. Не допускайте к использованию прибора детей и людей с ограниченными возможностями.
9. Не используйте прибор в чрезмерно влажных и пыльных условиях, поскольку это может привести к неисправности или поражению электрическим током.
10. Не используйте прибор в помещении с температурой 40° С или выше.
11. Не допускайте нагревания массажера от тепловых приборов или попадания на прибор прямых солнечных лучей.
12. Не используйте прибор в случае повреждения тканевого покрытия.
13. Не вставляйте посторонние предметы в прибор.
14. Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся материалов.
15. Не опускайте прибор в воду и не беритесь за него влажными руками.
16. В случае попадания жидкости на прибор, отключите массажер от сети и обратитесь к специалисту в сервисный центр.
17. Не накрывайте прибор тканевыми покрытиями или одеждой во время использования, т.к. это может привести к перегреву прибора и возгоранию.
18. Не вставайте на прибор ногами, не садитесь на него и не кладите на массажер тяжелые предметы, так как это может привести к травме или поломке.
19. Отключайте прибор от электросети после использования.

-
20. Не вскрывайте прибор самостоятельно, это может привести к травме или поражению электрическим током.
 21. Если вы не используете массажер в течение длительного времени, храните его в пыле- и влагонепроницаемом месте.
 22. Для очистки массажера используйте мягкую ткань. Не используйте для очистки растворители и другие агрессивные моющие средства.
 23. В случае поломки прибора обратитесь к специалисту в сервисный центр. Не пытайтесь производить самостоятельный ремонт прибора.
 24. Несоблюдение мер безопасности снимает прибор с гарантийного обслуживания.
 25. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильной эксплуатации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Массажер для шеи и плеч D&D UM-03 - 1шт
2. Руководство по эксплуатации - 1шт
3. USB-кабель - 1шт
4. Коробка - 1шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания от сети: 220В, 50Гц

Номинальное напряжение: 5В/2А

Номинальная мощность: 24Вт

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Кнопка включения/выключения прибора





Кнопка выбора режимов массажа



Кнопка включения/выключения прогрева



Кнопка выбора скорости массажа (2 скорости)

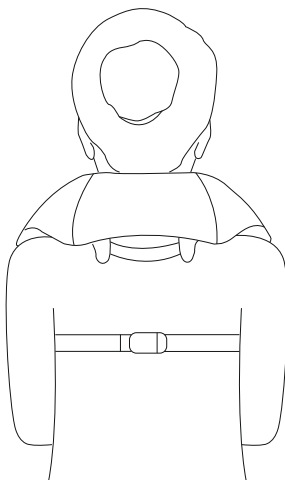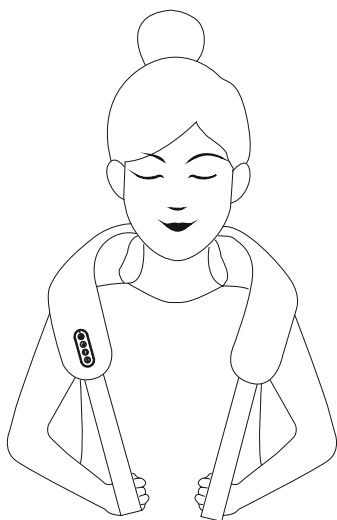

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Перед использованием снимите аксессуары или другие предметы, которые могут повлиять на массаж.

Нельзя использовать массажер во время зарядки. Подключите зарядный кабель к зарядному порту и адаптеру (в комплект не входит) и подключите к сети. Перед первым использованием рекомендуем зарядить массажер 3 часа. Не пытайтесь включить массажер, когда он стоит на зарядке. Он включится только после отключения от сети.

Легкое нагревание основного блока и адаптера во время зарядки является нормой.

Во время зарядки индикатор горит красным, после завершения зарядки горит зеленым светом. После зарядки отключите источник питания.

Слабый массаж. Возможно у аппарата низкий уровень заряда. Необходимо зарядить прибор.

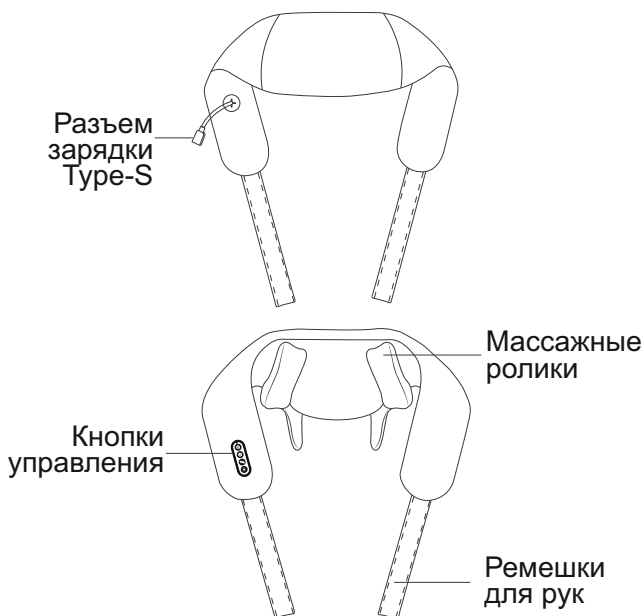

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Включите массажер длительным нажатием (3-5сек) на кнопку Вкл
2. Наденьте массажер на шею или другую часть тела и примите удобное положение
3. Выберите режим и настройте комфортную скорость
4. Включите функцию нагрева
5. Выключите массажер длительным нажатием на кнопку Вкл/Выкл или дождитесь окончания массажа, через 10 минут

Выбор режимов массажа и скорости

По умолчанию включается 1 режим. Нажмите на кнопку выбора режима, чтобы выбрать один из двух режимов массажа и скорости

Выбор прогрева

Нажатие на кнопку включить прогрев, нажмите еще раз, чтобы выключить

Автоматическое отключение через 10 минут.

Варианты использования



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина неисправности	Возможный способ устранения неисправности
Прибор не включается	Аппарат неисправен	Обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта прибора
	Не нажата кнопка включения	Убедитесь, что вы нажали кнопку включения
	Не работает USB-шнур для зарядки массажера	Замените USB-шнур
	Разряжен	Необходимо зарядить прибор
Массажер выключился во время массажа	Нажатие кнопки выключения на панели управления	Убедитесь, что кнопка выключения не была нажата случайно
	Сработала функция автоотключения	Отключите прибор и дайте массажеру остыть

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На настоящий прибор установлен гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи. Гарантийное обслуживание подразумевает под собой бесплатный ремонт изделия или замену на аналогичный прибор в случае невозможности ремонта.

Бесплатное гарантийное обслуживание осуществляется только в случае соблюдения покупателем правил эксплуатации согласно инструкции пользования прибором.

Повреждения прибора не должны быть следствием потребительского износа.

Обязательство по гарантийному обслуживанию оказывает организация, продавшее изделие.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи _____

Серийный номер прибора _____

Информация о фирме-продавце _____

*Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет.
С условиями гарантийного обслуживания согласен.*

Подпись покупателя _____

Официальный сервисный центр D&D: (3412) 572-005

Адрес: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 73

E-mail: info@dd-rus.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Массажер для шеи и плеч
марки D&D (Ди энд Ди)
Модель UM-03

Завод изготовитель:

Shenzhen New Gain Import & Export Ltd

Адрес завода изготовителя:

6/F, Building C, Dong He Industrial Mansion,
No.6 Yue He Street, Sha Shen Road, Sha Tou Jiao Yan Tian District, Shenzhen, China
6/Ф Билдинг С, Донг Хе индастриал Мэнсон, №6 Юэ Хе стрит, Ша Шен роуд,
Ша Тоу джао Йан Тиан дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер:

ИП Богоявленский Д. В., Республика Татарстан, Агрызский район, д. Иж-Бобья.
Тел.: (3412) 572-005